

## 快速导引

在正确的使用方法之下，雷射健发梳是非常有效的产品。是由精密的零件制造而成的，在正常的操作之下，可以持续使用很多年。


我们建议每次使用雷射健发梳不少于 5 分钟，也不超过 15 分钟

- 头 4 周每周使用 3 次
- 之后每周 2 次

我们建议雷射健发梳使用在洗净的头皮上。你的头发可以是湿的、吹风机吹干的或是用毛巾擦干的。雷射健发梳应该在使用任何作用在头皮上的发胶、外用生发水、喷发胶或是喷雾假发类产品前使用。



1. 把变压器的电源输出接头插入雷射健发梳。

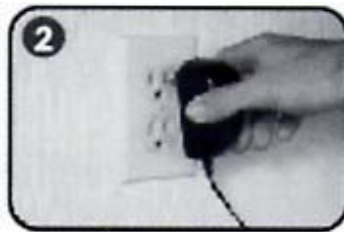

2. 把变压器插头插入墙上的插座。



3. 按"Power"钮一次, 然后按"Laser"钮一次已启动健发梳。



4. 把雷射梳平放在头皮上, 使两排梳齿接触到你的头皮。



*Stop and holding 4-5 seconds every 1/2 inch.*

5. 一步步的移动雷射梳, 每次在头皮上的一个地方停4或5秒然后移动1/2英(1.27公分)到头皮上下一个地方。(心中默念"one thousand, two thousand, 等." 可能会有帮助你掌握时间)。

6. 逆着头发生长的方向移动健发梳。蓄长头发者，在健发梳移动的前方，用一般的梳子或是你的手撩起头发。使健发梳照上述的方式完整经过全部的头皮达两次。
7. 使用后按"power" 钮关掉电源，移除墙上的变压器，把健发梳放入收纳盒中。

### 注意事项

- 每次使用健发梳的时间应该是介于 5~15 分钟之间。

- 缓慢的移动健发梳。这是非常重要的，如果你移动得太快，使用上将不会有效果。
- 如同一般的治疗，我们建议你不要过量使用健发梳，多余的使用会导致较没用的效用。